



## הוראות לאיסוף דגימת צואה מסוג GI-360™

בערכת איסוף הדגימות שקבלתם תמצאו קלקר ובתוכו:

2. ערכת איסוף (1x).



Kit Box

1. טופס בקשה (למילוי פרטים אישיים) וטופס הסכמה מדעת.



4. קרחים ג'ל להקפאה (1x).




Ice Pack  
(place in freezer immediately)

3. מגש לאיסוף צואה (3x).



Stool Collection Containers (3)

שלושה סוגים של שקיות איסוף דגימות צואה כמותואר מטה במיכלים ייעודיים לפי ימי איסוף רלוונטיים (פקקים שחורים, פקק צהוב ופקק לבן):

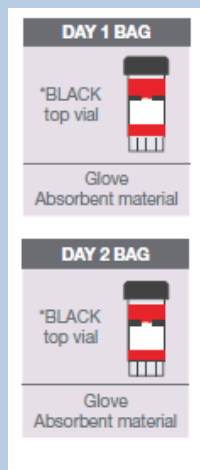

### חשוב מאוד!

\* שים לב, חלקם העליון של מיכלי הדגימה השחורים והצהובים מכילים נוזל משמר. אם שפת הנוזל יורדת מתחת לאמצע מיכל האיסוף או שיש חשש לדליפה, נא צור קשר עם המעבדה. הימנע ממגע של הנוזל עם העור והעיניים. במקרה של פגיעה בעיניים שטוף אותן עם מים במשך 15 דקות. במקרה של פגיעה בעור יש לשטוף במים וסבון.

במקרה של בליעה אנא פנה בדחיפות לרופא.

מיד כשדגימת הצואה מוכנה, יש להתקשר למעבדה לטלפון: 03-9611124.



אי.אם.סי. - מדיקל סנטר לבורטוריס בע"מ  
AMC - MEDICAL CENTER LABORATORIES, Ltd.

רחוב הנחשול 30, נווה-ים, ראשון לציון 75437, טל: 03-9611124  
30 Hanachshol St., Nave-Yam, Rishon le Zion 75437, Tel: 03-9611124

**אנא קרא בעיון את ההוראות המפורטות לפני איסוף דגימת הצואה ולפני הפסקת כל תרופה.**

1. יש להימנע במשך 14 ימים לפני הבדיקה מנטילת תוספי תזונה ואנטיביוטיקה מכל סוג.
2. יש להימנע כיומיים לפני הבדיקה מלקיחת אספירין וכל תרופה אנטי דלקתית (ממשפחת NSAIDs), מסייעי עיכול, תרופות נגד עצירות, גליצרין, פחם פעיל, בטאין HCL, נוגדי צרבות או חימר בנטונייט.
3. אין לקחת דגימה כאשר יש דימום פעיל כתוצאה מטחורים או מחזור.
4. לאחר ביצוע קולונוסקופיה או חוקן יש להמתין כ-4 שבועות לפני לקיחת הדגימה.
5. אין לזהם את דגימת הצואה עם שתן או מים.
6. תחילה, אם עדיין לא חתמת על טופס ההסכמה מדעת, אנא חתום וצרף לערכה.  
אנא מלא את פרטי הנבדק בטופס הבקשה. **הקפד לכתוב את תאריך ושעת איסוף הדגימה על גבי הטופס.**

7. אנא רשום על המדבקה שעל גבי המיכל ללקיחת הדגימה:

- שם מלא
- תאריך לידה.
- תאריך ושעת לקיחת הדגימה
- יש לוודא כי איסוף הדגימה מבוצע למיכל הייעודי לפי היום הרלוונטי:  
איסוף ביום הראשון – מיכל עם פקק שחור  
איסוף ביום השני – מיכל עם פקק שחור  
איסוף ביום השלישי – מיכל עם פקק שחור, פקק צהוב ופקק לבן.

8. באמצעות כפפות חד-פעמיות אסוף דגימת צואה לתוך מגש האיסוף המסופק בערכה. במידת האפשר, הימנע ממתן שתן לפני איסוף הדגימה כדי למנוע ערבוב של השניים בדגימה.



9. הסר את מכסה המיכל ובאמצעות הכפית המחוברת לפקק, אסוף צואה ממספר איזורים שונים בדגימה





אי.אם.סי. - מדיקל סנטר לבורטוריס בע"מ  
AMC - MEDICAL CENTER LABORATORIES, Ltd.

רחוב הנחשול 30, נווה-ים, ראשון לציון 75437, טל: 03-9611124  
30 Hanachshol St., Nave-Yam, Rishon le Zion 75437, Tel: 03-9611124

10. מלא את המיכל בדגימת צואה עד לקו המילוי המסומן על התווית, כפי שמופיע באיור מטה והברג היטב את המיכל לאחר האיסוף. שים לב לא למלא מעבר לקו.



11. **עבור מיכלים עם פקקים שחורים ופקקים צהובים**: נער את המיכל במשך 30 שניות בעוצמה, על מנת לערבב את הדגימה עם נוזל החומר המשמר. אין להקפיד את הדגימה. בסיום הערבוב יש להעביר את הדגימה למקרר.



**מיכלים עם פקקים לבנים** אינם מכילים את נוזל החומר המשמר ועל כן אין צורך בעירבוב.



**אי.אם.סי. - מדיקל סנטר לבורטוריס בע"מ**  
**AMC - MEDICAL CENTER LABORATORIES, Ltd.**

רחוב הנחשול 30, נווה-ים, ראשון לציון 75437, טל: 03-9611124  
30 Hanachshol St., Nave-Yam, Rishon le Zion 75437, Tel: 03-9611124

**אופן איסוף דגימות הצואה יתבצע באופן הבא:**

**יום 1:**

לוודא ששם המטופל, תאריך הלידה ותאריך האיסוף רשומים על גבי המבחנה.  
הסר את מכסה המיכל עם הפקק השחור והכנס את הצואה בהתאם להוראות שבסעיפים 9-11  
הכנס את המבחנה לשקית המיועדת לדגימה של יום 1  
אפסן במקרר עד למשלוח. **נא לא להקפיא.**

**יום 2**

עקוב אחר ההוראות של יום 1  
הכנס את המבחנה לשקית המיועדת לדגימה של יום 2  
אפסן במקרר עד למשלוח. **נא לא להקפיא.**

**יום 3**

לוודא ששם המטופל, תאריך הלידה ותאריך האיסוף רשומים על גבי שלושת המבחנות  
הסר את המכסה מהמיכל עם הפקק הלבן והכנס את הצואה בהתאם להוראות שבסעיף 9.  
אין צורך לערבב את המבחנה. יש להכניסה לשקית הנפרדת, לשים את הקרחום בכיס השקית  
**ולהכניס למקפיא. להקפיא למשך 6 שעות לפחות.**

הסר את המכסים מהמיכלים עם הפקק הצהוב והפקק השחור והכנס את הצואה בהתאם להוראות  
שבסעיפים 9-11.

הכנס את שני המיכלים לשקית המיועדת ליום 3 ושמור במקרר עד למשלוח.

13. ביום הגעתך למעבדה, **לא לשכוח להכניס גם את טופס הבקשה המלא ולוודא שערכת  
האיסוף סגורה היטב.**

מצפים לראותך,

צוות המעבדה